

La tecnologia Fotobiomodulazione (PBM). Il potere della luce pulsata

CareWear è la nuova frontiera della terapia indossabile, basata sulla energia fotonica pulsata rossa e blu, che produce sollievo continuo dal dolore persistente e dalla tensione muscolare. Il kit CareWear è composto da una **unità di controllo** ed un **patch luminoso (cerotto)** ideale per l'assistenza domiciliare, in strutture sanitarie o in combinazione con le terapie domiciliari .

il Kit CareWear Include:

- Manuale d'uso
- Guida Rapida
- Controller singolo che può essere utilizzato con tutti i patch luminosi CareWear
- Caricatore universale e base di ricarica USB 2.0
- Comoda custodia da viaggio



Kit Paziente
Facile da usare
Pratico

COMPONENTI CAREWEAR

Patch Luminosi Riutilizzabili



Realizzati con 1500 Micro LED stampati e integrati su patch adesive con idrogel ultra sottili. Forniscono una efficace terapia luminosa in soli 30 minuti .

Controllore Wireless



Il Controller funziona sia come alimentatore del patch che come modulatore dei dosaggi di luce. Ricaricabile e resistente all'acqua, è pre-programmato per fornire il corretto dosaggio di luce per ogni modello di patch CareWear.

Patches luminosi di ricambio



I cerotti luminosi di ricambio sono disponibili in diverse forme e dimensioni per diverse parti del corpo.

Ogni scatola contiene 10 cerotti che, con la dovuta cura, possono essere riutilizzati fino a 20 volte ciascuno..

CareWear®
Wearable Therapeutics

CareWear®
Wearable Therapeutics

Light Therapy Indossabile

GUIDA PER IL PAZIENTE

Sollievo dal dolore e recupero per:

Collo/Testa

Schiena

Emicrania

ATM

E molte altre patologie doloranti - per saperne di più consultare il proprio medico



REORDER



Designed in USA
Manufactured for
CareWear Corp.
in Taiwan & USA

CE 2460 FDA REGISTERED

Patents at: www.carewear.net/patents

Fotobiomodulazione e calore
lenitivo per curare ovunque

Sollievo dal dolore con la terapia digitale

TESTA / COLLO

SCHIENA

EMICRANIA

ATM

E molte altre patologie doloranti - per saperne di più consultare il proprio medico

Allevia il dolore e la tensione muscolare


Il cerotto luminoso indossabile (patch) CareWear fornisce energia luminosa pulsante rossa e blu e calore lenitivo per dare un sollievo continuo dal dolore persistente e dalla tensione muscolare.

Sollievo dal dolore senza farmaci

I patch CareWear offrono una valida alternativa ai farmaci: all'acetaminofene, ai FANS e agli oppioidi per controllare il dolore senza effetti collaterali indesiderati.

CareWear® Wearable Light vs. Pain Medication

	Decrease Pain	Decrease Inflammation	Safe for Long Term Use	No Side Effects
CareWear	✓	✓	✓	✓
NSAIDs	✓	✓		
Acetaminophen	✓			
Opioids	✓			

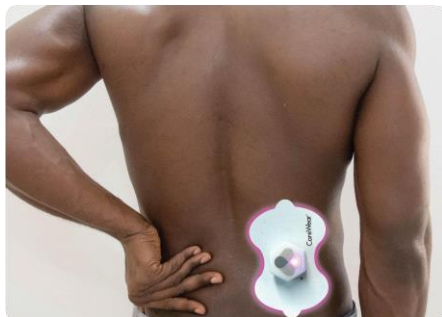


Sollievo dal dolore in movimento

Accelera il recupero lavorando direttamente sul muscolo o sull'articolazione dolorante grazie ai cerotti luminosi adesivi riutilizzabili di CareWear che forniscono un sollievo continuo dal dolore, mentre trattano le lesioni dei tessuti molli.

Migliora il movimento

Riduce il dolore, la rigidità articolare e migliora la circolazione utilizzando i cerotti leggeri CareWear prima dell'allenamento. Migliora la resistenza muscolare e la stabilità articolare. Muoviti con Self Care senza l'utilizzo di farmaci e torna a uno stile di vita più sano e attivo.

Usa il CareWear a casa, in strutture sanitarie e per un recupero più veloce.

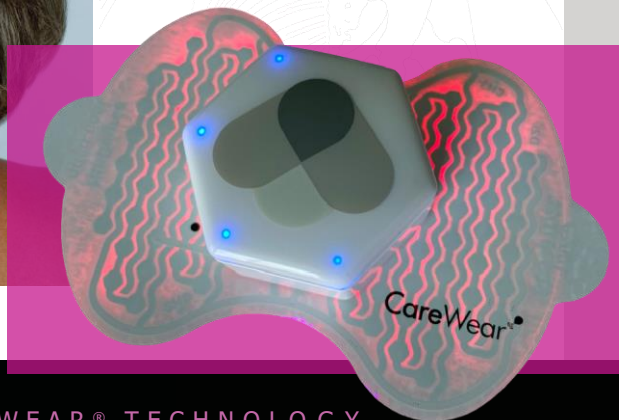

DOMANDE FREQUENTI

Quante volte può essere usato?

La durata del cerotto luminoso varia a seconda della cura e tipo di pelle, ma va sostituito quando non aderisce più bene alla pelle. Una corretta preparazione della pelle e una corretta conservazione del cerotto possono prolungare la durata di utilizzo del cerotto luminoso. Le patch in genere ha una durata di 20 applicazioni

Puoi far durare più a lungo il cerotto luminoso?

Una corretta pulizia della pelle prima dell'uso del cerotto può ridurre al minimo l'accumulo di sudore, pelle secca o peli sull'idrogel adesivo. Se il cerotto ha perso aderenza, si può reidratare l'idrogel inumidendolo con alcune gocce d'acqua e strofinando delicatamente l'idrogel per reidratare. Una corretta conservazione del cerotto evitando l'esposizione all'aria e ai raggi UV può migliorare la sua durata. Dopo ogni trattamento, assicurati di riposizionare il cerotto nella sua busta con cerniera richiudibile.

Posso usare il cerotto CareWear con altre terapie per il dolore?

Sì. I cerotti luminosi CareWear sono una terapia non farmacologica che può essere utilizzata in combinazione con altre terapie.

Posso usare il cerotto CareWear con creme e gel per uso topico?

Sì. Tuttavia, creme/gel per uso topico NON devono essere applicati sulla parte di trattamento immediatamente prima dell'applicazione del cerotto luminoso in quanto potrebbero danneggiare l'idrogel o produrre calore eccessivo.

I cerotti CareWear possono essere utilizzati sui tatuaggi?

I bassi livelli di irradianza e variazione di temperatura forniti dai cerotti CareWear non sono sufficienti a causare il riscaldamento locale di tatuaggi rossi, blu o neri.

I cerotti CareWear possono essere utilizzati con i bambini?

I cerotti luminosi di CareWear possono essere utilizzati su adulti e bambini dai 13 anni in su. Chiedi consiglio a un medico prima di applicare ai bambini di età inferiore ai 13 anni.

CAREWEAR® TECHNOLOGY

Facile da usare,
Risultati comprovati scientificamente,
Antidolorifico per un uso illimitato

Distributore esclusivo per l'Italia



Email: info@aditechsr.com - Tel. +39 0712901262