

Part no.	311-1241000-010
Product name	TD 1241 XX
Spec	L297*W420mm/模造紙70P/雙面/黑/4折(長邊對2折+短邊對2折)完成尺寸L74*W105mm
Designer	Emma
Color	■ K 100

TD-1241

TERMOMETRO WIRELESS

311-1241000-010
Version 2.02020/07

ISTRUZIONI DI USO



MedNet EC-REP GmbH
Birkstraße 10, 48163 Münster - Germany
Taidoc Technology Corporation
11-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
#888 New Taipei City, Taiwan
www.taidoc.com



INFORMZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE PRIMA DELL'USO

Tenere presente le seguenti precauzioni d'uso

1. E' necessario prestare molta attenzioni quano il dispositivo è utilizzato da bambini o diversamente abili
2. Usare il termometro solo per uso appropriato seguendo le istruzioni d'uso .
3. Non usare l'apparato se danneggiato
4. Tenere il sensore sempre pulito.
5. Non utilizzare gas ossido di etilene, calore, autoclave o altri metodi aggressivi per sterilizzare il dispositivo.
6. Posizionare il cappuccio protettivo del sensore sull'estremità del sensore quando non viene utilizzato.
7. Se proviene da un ambiente con una temperatura più calda o più fredda o dopo un periodo di sforzo, consentire all'utente e al termometro di acclimatarsi alla temperatura ambiente per 20 minuti prima di eseguire una misurazione.
8. Poiché la temperatura della fronte può essere influenzata dal sudore, dall'olio e dalla temperatura circostante, la lettura deve essere presa solo come riferimento.
9. No utilizzare prodotti infiammabili
10. Non utilizzare accessori non forniti o consigliati dal produttore. Non tentare di modificare il dispositivo per evitare pericoli.
11. Una corretta manutenzione è essenziale per la longevità del dispositivo. Questo termometro è stato calibrato in fabbrica. Se segui le istruzioni, non è necessario regolarlo regolarmente. Tuttavia, se sei preoccupato per l'accuratezza della misurazione, contatta il servizio clienti locale o il punto di acquisto per assistenza
12. Contattare sempre il produttore o il rappresentante del produttore per segnalare operazioni o eventi imprevisti. Non provare a risolverlo da solo.
13. Quando si utilizza il termometro, stare lontano dalle radiazioni elettromagnetiche, come il cellulare in uso
14. Non esporre l'apparato a forti campi elettromagnetici potrebbero alterare la misurazione .
15. Quando si utilizza con altri dispositivi è necessario effettuare test EMC
16. Tenere il coperchio della sonda fuori dalla portata dei bambini. Le piccole parti staccate dal dispositivo possono provocare il soffocamento dei bambini per l'inalazione o la deglutizione
17. Non tentare di effettuare la manutenzione del dispositivo mentre è in uso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE

- Utilizzare il termometro in un campodi temeratura da 10°C a 40°C (50°F to 104°F), e umidità relativa da 30% a 85%.
- Conservare il termometro in un posto fresco e asciutto: temperatura tra -20°C e 60°C (-4°F to 140°F) umidità relativa tra 30% e 85%.
- Non esporre al sole .
- Non fare cascare il termometro, se succede e penda che il termometro è danneggiato contattare il servizio clienti del fornitore .
- Questo apparato non può sostituire una consultazione con il proprio medico .

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il termometro TD-1241. Si prega di leggere prima questo manuale di istruzioni in modo da poter utilizzare questo termometro in modo sicuro e corretto. Conservare questo manuale di istruzioni per riferimenti futuri. Questo innovativo dispositivo medico utilizza un'avanzata tecnologia a infrarossi (IR) per misurare la temperatura in modo istantaneo e preciso sulla fronte / superficie. Il termometro frontale TD-1241 fornisce una lettura della temperatura corporea dalla radiazione termica emessa dalla fronte senza contatto con il corpo. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e completamente i seguenti contenuti.

USO CONSENTITO

Il termometro TD-1241 è destinato alla misurazione e al monitoraggio della temperatura corporea umana dalla misurazione della fronte . Il dispositivo è destinato all'uso domestico da parte di persone di tutte le età.

COME FUNZIONA

Il termometro misura il calore a infrarossi generato dalla superficie della pelle sul vaso e sul tessuto circostante. Il termometro quindi lo converte in un valore di temperatura.

NOTE:


Il dispositivo non emette alcun segnale in infrarosso

Cantenuto



Parti del termometro

- Pulsante selezione °C / °F n
- Pulsante di impostazione
- Sonda
- Indicatore Bluetooth
- Schermo
- Pulsante accensione
- Pulsante selezione
- Pulsante memoria
- Copertura batteria
- Aletta

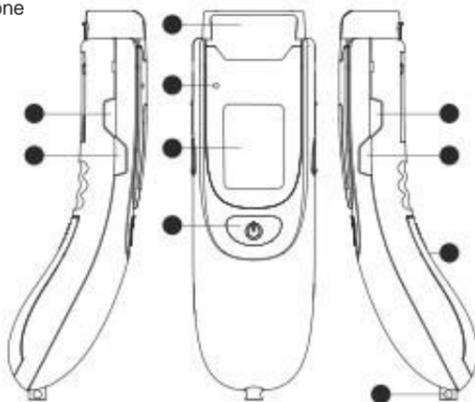

SCHERMO

- Data e ora
- Temperatura
- Indicatore temperatura corporea
- Indicatore temperatura oggetti e superfici
- Indicatore temperatura della stanza
- Simbolo Bluetooth
- Memoria
- Unkta misura temperatura
- Avviso di errore
- Indicatore batteria
- Indicatore date




MODI D'USO

Sono disponibili tre modalità.

1. Corpo

Questo modo è utilizzato per misurare la temperatura corporea dalla fronte

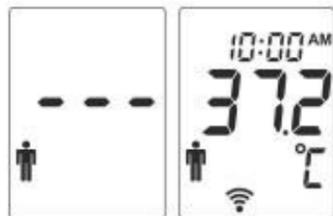

2. Superficie

Viene utilizzato per misurare la temperatura delle superficie.



3. Stanza

Questo è utilizzato per misurare la temperatura della stanza.




IMPOSTAZIONI

La prima volta d'uso va impostata la data e l'ora, necessario anche quando si sostituisce la batteria .

Step 1 usare per accendere il termometro. Premere per 5 secondi per entrare nel modo impostazioni .

Step 2 Impostare la data

- Premere Mode o °C / °F per selezionare il mese.
- Premere impostazioni per il passo successivo.
- Premere Mode o °C / °F per selezionare il giorno , l'anno, l'ora e minuti

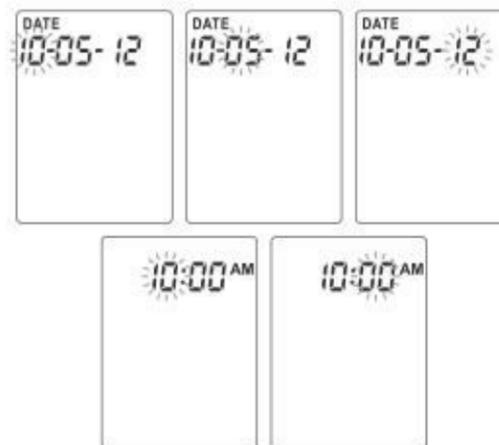

Le impostazioni sono complete. Il termometro si spegnerà automaticamente


NOTE:

If the meter is idle for 30 seconds during the setting mode, it will switch off automatically.

CAMBIO BATTERIE

Il termometro è fornito di due batterie AA alcaline . Lo schermo mostrerà il simbolo per avvisare che le batterie sono esauste, Procedere immediatamente alla sostituzione come illustrato qui di seguito:

1. Togliere il coperchio seguendo il verso della freccia Fig. 1)
2. Sostituire le vecchie batterie con due nuove 1.5V AA (Fig. 2)
3. Chiudere il coperchio . Se sono state inserite correttamente si sentirà un beep

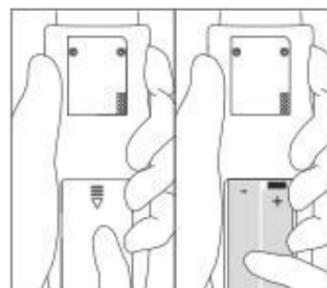

(Fig. 1)

(Fig 2)

NOTE:

- Anche se il termometro funziona quando appare questo simbolo Si raccomanda di sostituire le batterie.
- Rimuovere le batterie se non si usa per lungo tempo
- Tenere le batterie sempre lontano dalla portata dei bambini

INFORMAZIONI SULLA TEMPERATURA

CORPOREA

La temperatura corporea può variare da un individuo / persona all'altro. Varia anche in base alla posizione sul corpo e all'ora del giorno. Di seguito sono riportati gli intervalli normali statistici di diversi siti. Tieni presente che le temperature misurate da diversi siti, anche contemporaneamente, non devono essere confrontate direttamente. La febbre indica che la temperatura corporea è più alta del normale. Questo sintomo può essere causato da infezione, vestirsi eccessivamente o immunizzazione. Alcune persone potrebbero non avere la febbre anche quando sono ammalate. Questi includono, ma non sono limitati a, bambini di età inferiore a 3 mesi, persone con un sistema immunitario compromesso sistemi, persone che assumono antibiotici, steroidi o antipiretici (aspirina, ibuprofene, paracetamolo) o persone con determinate malattie croniche. Consultare il proprio medico in caso di malessere anche se non si ha la febbre

Table 1*1. Campo di temeperatura corpore nella norma

Orale	0.6°C (1°F) o maggiore se superiore a 37°C (98.6°F)
Rettile/ Orecchio	0.3°C to 0.6°C (0.5°F to 1°F) più elevata di quella orale
Ascellare	0.3°C to 0.6°C (0.5°F to 1°F) minore di quella orale

*1. Body Temperature at WebMD;


website: <http://firstaid.webmd.com/body-temperature> retrieved at 2010 Jan 7.

SELEZIONARE L'UNITA' DI TEMPERATURA

Questo strumento fornisce due unità di misura utilizzate per indicare la temperatura corporea / superficiale / ambiente, °C o °F, per la selezione preferita.

1 Premere per accendere il termometro.

2 Premere °C / °F per selezionare l. Premere per cominciare la misura Il termometro si spegna automaticamente dopo 30 secondi .

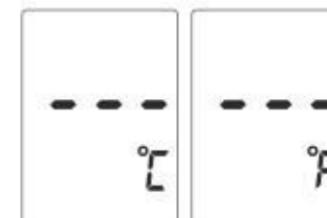


COME USARE IL DISPOSITIVO

- 1 Rimuover Eil coperchio . Premere to per accendere**



- 2 Premre il pulsante Mode per 5 secondi per impostare lo schermo in temperatura coporea to. Lo schermo lampeggerà**

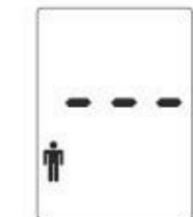

- 3 Move the probe close to the forehead.**

Tieni premuto . Assicurati che la sond sia vicina alla fronte ed il termometro non faccia angolo . Stai adu una distanza di 3-7 cm



- 4 Leggi risultati**

Dopo aver rilasciato il pulsante leggere i risultati sullo schermo.

