



Guida Utente i-Help

Guida per l'utente del dispositivo i-Help

Ufficio Tecnico ADiTech S.R.L.

20/01/2016

i-Help UG rev.01



ADITECH S.R.L

INDIRIZZO: VIA GHINO VALENTI, 2, 60131, ANCONA (AN)

TELEFONO: 071/2901262

FAX: 071/2917195

E-MAIL: INFO@ADITECHSRL.COM

SITO WEB: WWW.ADITECHSRL.COM

LINK CORRELATI

MANUALE UTENTE APP. ANDROID:

[HTTP://WWW.ADITECHSRL.COM/MEDIA/738388-MANUALEUTENTEAPPANDROID.PDF](http://WWW.ADITECHSRL.COM/MEDIA/738388-MANUALEUTENTEAPPANDROID.PDF)

MANUALE UTENTE APP. IOS:

[HTTP://WWW.ADITECHSRL.COM/MEDIA/735944-MANUALEUTENTEAPPIOS.PDF](http://WWW.ADITECHSRL.COM/MEDIA/735944-MANUALEUTENTEAPPIOS.PDF)

MANUALE D'USO:

[HTTP://WWW.ADITECHSRL.COM/MEDIA/738887-MANUALED_USO.PDF](http://WWW.ADITECHSRL.COM/MEDIA/738887-MANUALED_USO.PDF)

Sommario

Introduzione all'i-Help	1
Funzioni generali	1
Contenuto della scatola	1
Caratteristiche dell'apparato	2
Come si indossa	2
Caratteristiche tecniche	3
Inserimento SIM	3
Associazione con un telefono	4
Carica	4
Precauzioni	4
Sessione speciale	5
Falsi allarmi	5
Allarmi non rilevati	5

Introduzione all'i-Help

L' i-Help è un nuovissimo apparato indispensabile per la propria sicurezza e benessere, mette insieme tre importanti elementi: rilevatore di caduta, localizzatore, chiamate a numeri prefissati. Queste caratteristiche lo rendono ideale per assistere anziani, nei lavori pericolosi, nello sport e nella vita quotidiana.

Grazie alla sua semplicità d'uso e al suo sistema di comunicazione e localizzazione consente di essere sempre in contatto con una persona cara in caso di bisogno, di caduta accidentale, di smarrimento.

Inoltre offre funzioni aggiuntive come avvisi per ricordarsi di prendere le medicine, un elenco di persone da chiamare automaticamente in caso di bisogno, posizione GPS, spegnimento da remoto e chiamate telefoniche.

Funzioni generali

- Messaggi vocali e avvisi automatici di caduta via SMS;
- Posizionamento con GPS;
- Chiamate vocali da un solo tasto;
- Promemoria farmaci;
- SMS di controllo stato del dispositivo;
- SMS di controllo stato batteria;
- SMS di avviso apparato acceso ;
- Spegnimento da remoto;
- Visualizzazione posizione dispositivo da remoto.

Contenuto della scatola



Figura 1 - apparato i-Help



Figura 2 - Batteria al litio



Figura 3 - Cavo USB



Figura 4 - Caricatore

Caratteristiche dell'apparato

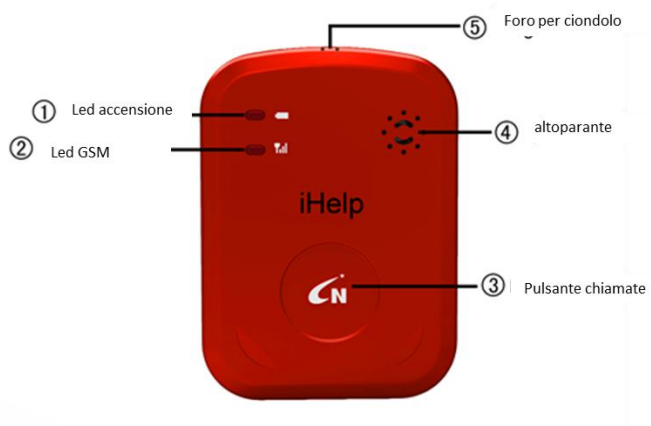


Figura 5 - Vista frontale



Figura 6 - Vista laterale

Come si indossa

Può essere indossato sulla cintura come in figura 7 o portato dentro la borsa.

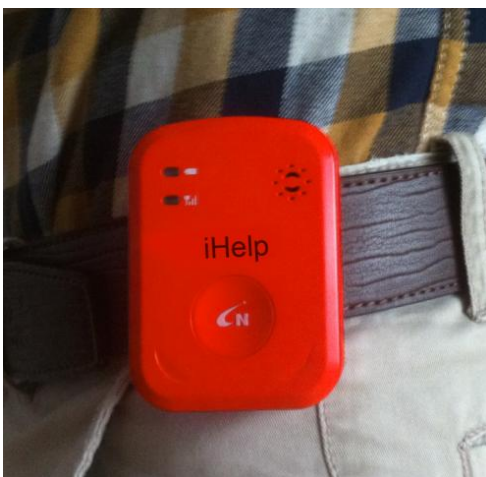
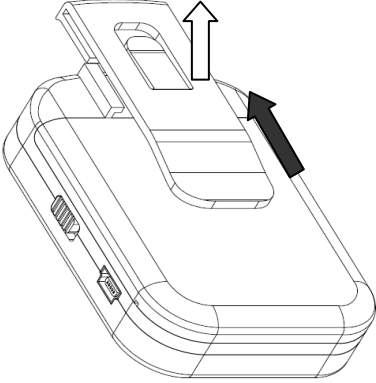

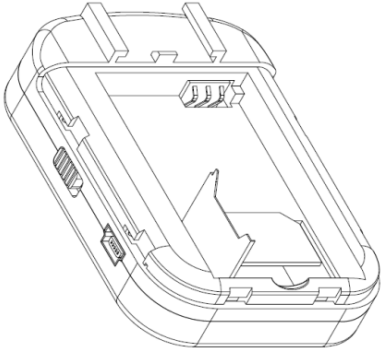
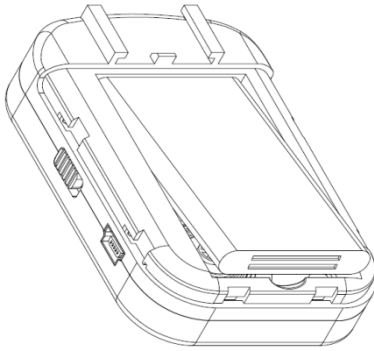




Figura 7 - i-Help sulla cintura

Caratteristiche tecniche

- **Rete:** GSM
- **Banda di frequenza:** 850/1900 MHz, 900/1800 MHz
- **Temperatura:** -10°C ~ 50°C
- **Autonomia in stand by:** 110 ~ 120 ore
- **Peso:** 69g
- **Dimensioni:** 73x53x18mm

Inserimento SIM

<p>1. Togliere il gancio sollevando il fermo e spingendo leggermente verso l'alto</p>	<p>2. Togliere il coperchio copri batteria spingendo leggermente verso il basso</p>
	
<p>3. Inserire la SIM nell'apposito contenitore</p>	<p>4. Inserire la batteria</p>
	
<p>5. Chiudere il coperchio</p>	<p>6. Rimettere il gancio</p>
	

Accendere quindi il dispositivo dal pulsante di accensione laterale (vedi figura 6).

Il Led (vedi figura 5) si illuminerà in modo intermittente per 15-20 secondi, successivamente sarà intermittente ogni 3 secondi.

Dopo 60 secondi l'i-Help sarà completamente funzionante. Se il LED si illumina ogni secondo significa che non c'è connessione GSM, controllare se la SIM è inserita in modo corretto.

NB: La SIM non deve avere la dimensione normale (né micro, né nano). Nel caso in cui sia micro o nano è possibile usare gli adattatori.

E' possibile scegliere liberamente qualsiasi gestore di telefonia mobile.

Assicurarsi che la SIM abbia credito e che sia stato precedentemente rimosso il PIN.

Il dispositivo invia SMS di notifica per comunicare l'avvenuta ricezione del comando inviato tramite App.

Assicurarsi che il gestore di telefonia mobile includa nel piano tariffario flat i messaggi di notifica.

Associazione con un telefono

L'i-Help necessita di collegarsi con un telefono per inviare avvisi, chiamate e inizializzare le funzioni del dispositivo.

Quando si attiva l'associazione con l'i-Help il telefono associato riceverà il messaggio di conferma dell'avvenuta associazione dopo circa 10-15 secondi.

Carica

Per un buon funzionamento del i-Help è bene tenerlo sotto carica almeno 8 ore.

Precauzioni

1. Spegnerne l'apparato quando si viaggia in aereo;
2. Spegnerne il dispositivo quando si è in ambienti con combustibili o esplosivi;
3. Spegnerne il dispositivo in ambienti ospedaliere se non è ammesso l'uso del cellulare;
4. Il dispositivo può essere assistito solo da personale esperto;
5. Possono essere utilizzati solo ricambi originali;
6. Accertarsi prima di accenderlo che il dispositivo sia asciutto;
7. Scollegare sempre il caricatore prima di rimuovere la batteria.

Sessione speciale

Falsi allarmi

- L'apparato è indossato acceso durante il sonno;
- Addormentarsi sulla sedia a dondolo;

In ogni caso basta premere il pulsante chiamata per fermare l'allarme.

Allarmi non rilevati

Può accadere quando si verifica uno dei seguenti eventi:

- SIM danneggiata o installata in modo errato;
- Apparato spento o batteria esausta;
- Segnale GSM debole;
- Caduta lenta.

Nota : Dispositivo utilizzabile solo come ausilio per la sicurezza personale.

Non si assume alcuna responsabilità per danni causati da uso improprio del dispositivo o in caso di emissione di falsi allarmi o mancata emissione di allarmi.